Smart EDC システム 設定手順書

がん研究センター東病院 2015-06-30

『Smart EDC システム』の動作環境について

以下に『Smart EDC システム』の動作環境を記載致します。

【サーバ環境】

		内容	
OS	Linux	(CentOS 6.4 検証済)	
Web サーバ	Apache 2 以降		
Web アプリケーション	Tomcat 6.0		
データベース	MySQL 5.1		
Java	JDK 1.7以降	(JDK1.7 検証済)	

【クライアント環境】

	内容	
PC	MicroSoft Internet Explorer 9, 10	
タブレット端末	iPad (iOS 6 以降)	

【インストール前提条件】

・MySQL の文字コードが UTF-8 であること

設定方法:my.cnfの[mysqld]セクションに以下の記述を追加します。

character-set-server=utf8

・MySQL でテーブル名の大文字/小文字識別を行わないこと 設定方法: my. cnf の[mysqld]セクションに以下の記述を追加します。

lower_case_table_names=1

・MySQLの group_concat の結果の最大長が設定されていること

※設定を行わないと、CSV 出力で 1024 バイトを超える文字がカットされます。

設定方法: my. cnf の[mysqld]セクションに以下の記述を追加します。

|group_concat_max_len=16384|

- ・外部ホストからの MySQL 接続が許可されていること
- ・apache と tomcat が連携されていること (mod_proxy_ajp 等で連携済みであること)

1. Smart EDC システムのインストール

Smart EDC システムのインストールについて、以下に記載します。

※ディレクトリ作成、ファイルコピー等が行われるため、実行は root 権限で行うようにして下さい。

① ダウンロードした SmartEDC_Installer. zip を解凍します。

[root@tedc_srv home]# unzip SmartEDC_Installer.zip

② 展開された「SmartEDC_Installer」ディレクトリに移動します。

```
[root@tedc_srv home]# cd SmartEDC_Installer
[root@tedc_srv SmartEDC_Installer]#
```

③「SmartEDC_Installer」ディレクトリの内容を確認します。 以下の3ファイル、3ディレクトリで構成されています。

```
[root@tedc_srv SmartEDC_Installer]# ls -ltr
合計 24
-rw-r--r--. 1 root root 1928
                              7月 22 11:07 2014 setup01.sh
                                 22 11:08 2014 setup02.sh
                              7月
           1 root root 589
                             7月 22 11:09 2014 setup03.sh
            1 root root 1495
                              7月 22 11:58 2014 database
           2 root root 4096
                              7月 22 11:58 2014 environment
           2 root root 4096
           10 root root 4096
                              7月
                                 22
```

1-1. MySQL にデータベース: smartedc を作成する

以下の手順にて MySQL にデータベース: smartedc を作成します。

(1)「SmartEDC_Installer」のシェルスクリプト「setup01.sh」 を実行します。

[root@tedc_srv SmartEDC_Installer]# bash setup01.sh

(2) MySQL のユーザ ID (root など管理者権限を持つユーザ) を入力します。

[root@tedc_srv SmartEDC_Installer]# bash setup01.sh MySQL ユーザIDを入力して下さい > root

(3) 上記(2)で入力したユーザ ID のパスワードを入力します。

※入力したパスワードは表示されませんので注意して下さい。

[root@tedc_srv SmartEDC_Installer]# bash setup01.sh

MySQL ユーザIDを入力して下さい > root

MySQL バスワードを入力して下さい > 🏾

(4) 作成するデータベース名を入力します。

※入力を省略した場合、データベース名「smartedc」で作成が実行されます。

[root@tedc_srv SmartEDC_Installer]# bash setup01.sh

MySQL ユーザIDを入力して下さい > root

MySQL バスワードを入力して下さい >

作成するデータベース名を入力して下さい。

(省略時:smartedc >

(5) データベースの作成が実行されます。

完了すると「MySQL にデータベース: smartedc を作成しました。」が表示されます。

[root@tedc_srv SmartEDC_Installer]# bash setup01.sh

MySQL ユーザIDを入力して下さい > root

MySQL バスワードを入力して下さい >

<u>作成するデータベース名を入力して下さい。</u>

(省略時:smartedc >

データベースを作成中です。しばらくお待ちください。

MySQLにデータベース:smartedcを作成しました。

以上で、データベースの作成は完了です。

作成したデータベースに外部ホストからの接続を許可するよう設定を行ってください。 ※セキュリティ上の観点から smartedc 専用の管理ユーザの作成を推奨いたします。

1-2. Web アプリケーションの DB 接続先情報を設定する

以下の手順で Web アプリケーションからデータベース: smartedc に接続するための情報を設定します。

(1)「SmartEDC_Installer」のシェルスクリプト:「setup02. sh」を実行します。

[root@tedc_srv SmartEDC_Installer]# bash setup02.sh

(2) データベースサーバの IP アドレスを入力します。

[root@tedc_srv SmartEDC_Installer]# bash setup02.sh DBサーバのIPアドレスを入力して下さい > 192.168.1.xxx

(3) 接続するデータベース名を入力します。1-1. (4) と同じ名前にして下さい。 ※入力を省略した場合、接続するデータベース名「smartedc」で設定されます。

[root@tedc_srv SmartEDC_Installer]# bash setup02.sh DBサーバのIPアドレスを入力して下さい > 192.168.1.xxx 接続するータベース名を入力して下さい。 (省略時:smartedc > ■

(4) 接続するデータベースの管理者権限を持つユーザ ID を入力します。

DBサーバのIPアドレスを入力して下さい > 192.168.1.xxx 接続するータベース名を入力して下さい。

(省略時:smartedc >

データベース:smartedoのユーザーIDを入力して下さい > ■

(5) 上記(4)で入力したユーザ ID のパスワードを入力します。 ※入力したパスワードは表示されませんので注意して下さい。

[root@tedc_srv SmartEDC_Installer]# bash setup02.sh DBサーバのIPアドレスを入力して下さい > 192.168.1.xxx 接続するータベース名を入力して下さい。

(省略時:smartedc)

データベース:smartedoのユーザーIDを入力して下さい > root データベース:smartedoのバスワードを入力して下さい > ■

(6) DB接続情報が作成されます。

完了すると「DB 接続先情報を設定しました。」が表示されます。

[root@tedc_srv SmartEDC_Installer]# bash setup02.sh DBサーバのIPアドレスを入力して下さい > 192.168.1.xxx 接続するータベース名を入力して下さい。

(省略時:smartedc >

データベース:smartedcのユーザーIDを入力して下さい > root

データベース:smartedoのバスワードを入力して下さい >

Using default encryption keys...

DB接続先情報を設定しました。

以上で、DB 接続先情報の設定は完了です。

1-3. WEB アプリケーション: smartEDC_system を設定する

以下の手順で WEB アプリケーション: smartEDC_system を Tomcat に設定します。

(1)「SmartEDC_Installer」のシェルスクリプト:「setup03. sh」を実行します。

[root@tedc_srv SmartEDC_Installer]# bash setup03.sh

(2) WEB アプリケーションを設定する Tomcat ディレクトリを入力します。 ※入力を省略した場合、「/usr/share/tomcat6/webapps」に設定されます。

[root@tedc_srv SmartEDC_Installer]# bash setup03.sh Webアブリケーションを格納するtomcatのディレクトリを入力して下さい。 (省略時:/usr/share/tomcat6/webapps) > ■

(3) WEB アプリケーションを入力します。

※入力を省略した場合、「smartEDC_system」に設定されます。

[root@tedc_srv SmartEDC_Installer]# bash setup03.sh

Webアブリケーションを格納するtomcatのディレクトリを入力して下さい。

(省略時:/usr/share/tomcat6/webapps) > Webアブリケーション名を入力して下さい。

(省略時:smartEDC_system > |

(4) SSL 対応/SSL 対応なしの選択を行います。

SSL 対応の WEB アプリケーションを設定する場合は、"y"

SSL 対応なしの WEB アプリケーションを設定する場合は、"n"を入力します。

[root@tedc_srv SmartEDC_Installer]# bash setup03.sh

Webアブリケーションを格納するtomcatのディレクトリを入力して下さい。

(省略時:/usr/share/tomcat6/webapps) >

Webアブリケーション名を入力して下さい。

(省略時:smartEDC_system >

SSL対応版を設定しますか。y/n > y

(5) 上記(2)で入力した Tomcat ディレクトリに(3)で入力した WEB アプリケーションの作成が行われます。 しばらくすると、SmartEDC で作成した CSV の格納ディレクトリ: EDCCSV を home ディレクトリに 作成するかの確認がありますので、選択を行います。

※"N"を選択した場合、第2章「2-2. CSV 格納ディレクトリの設定」を参照し、 格納先を設定するようにして下さい。

[root@tedc_srv SmartEDC_Installer]# bash setup03.sh

Webアブリケーションを格納するtomcatのディレクトリを入力して下さい。

(省略時:/usr/share/tomcat6/webapps) >

Webアブリケーション名を入力して下さい。

(省略時:smartEDC_system >

SSL対応版を設定しますか。y/n > y

Webアブリケーションを設定中です。しばらくお待ちください。

|homeディレクトリにCSV格納ディレクトリ:EDCCSVを作成しますか。y/n >

(6) 完了すると「Tomcat に WEB アプリケーション: smartEDC_system を設定しました。」が表示されます。

```
[root@tedc_srv SmartEDC_Installer]# bash setup03.sh
Webアプリケーションを格納するtomcatのディレクトリを入力して下さい。
(省略時:/usr/share/tomcat6/webapps) >
Webアプリケーション名を入力して下さい。
(省略時:smartEDC_system >
SSL対応版を設定しますか。y/n > y
Webアプリケーションを設定中です。しばらくお待ちください。
homeディレクトリにCSV格納ディレクトリ:EDCCSVを作成しますか。y/n > y
TomatにWebアプリケーション:smartEDC_systemを設定しました。
[root@tedc_srv SmartEDC_Installer]#
```

(7) Apache/Tomcat 連携に smartEDC_system を追加します。

例)「mod_proxy_ajp」で連携している場合、設定ファイルに以下の内容を追加します。

ProxyPass /smartEDC_system/ ajp://localhost:8009/smartEDC_system/

(8) Tomcat/Apache を再起動し、設定を反映します。

```
[root@tedc_srv SmartEDC_Installer]# /etc/rc.d/init.d/tomcat6 restart
Stopping tomcat6: [ OK ]
Starting tomcat6: [ OK ]
[root@tedc_srv SmartEDC_Installer]# /etc/rc.d/init.d/httpd restart
httpd を停止中: [ OK ]
httpd を起動中: [ OK ]
[root@tedc_srv SmartEDC_Installer]#
```

以上で、WEBアプリケーションの作成は完了です。

1-4. smartEDC_system を起動 する

(1) Smart EDC システム (管理者機能) 起動確認

http://サーバー名/smartEDC_system/servlet/a101_wp01_login

(SSL 対応版の場合、https で起動) にアクセスし、

「Smart EDC システム管理者ログイン」画面が表示されることを確認します。

※インストール時の初期登録ユーザ:admin/adminでログイン可能です。

(ログイン後、ユーザマスタメンテナンスでパスワードを変更するようにして下さい)



(2) Smart EDC システム (利用者) 起動確認

http://サーバー名/smartEDC_system/servlet/b710_wp01_login

(SSL 対応版の場合、https で起動) にアクセスし、

「Smart EDC システム利用者ログイン」画面が表示されることを確認します。



2. Smart EDC システムの各種設定

Smart EDC システムの管理者機能を使用して、以下の設定を行います。


2-1. NetCommons との連携

NetCommons と連携し、「ユーザー一覧取込」「患者・適格性情報取込」を行う場合、以下の設定を行います。

(1) 管理者機能「メインメニュー」-「マスタメンテナンス」-「システム規定値マスタ」を起動します。




(2) 「規定値キーワード」に"017"を入力し、TABキーを押下します。

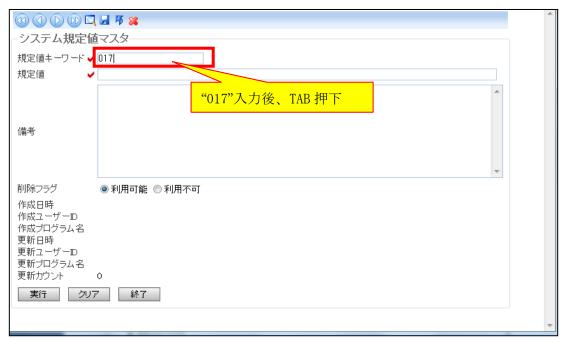

(3) NetCommons サーバの設定データが表示されるので、

「規定値」に連携する NetCommons サーバの URL (Http://を除く) を入力し、「実行」ボタンを押下します。

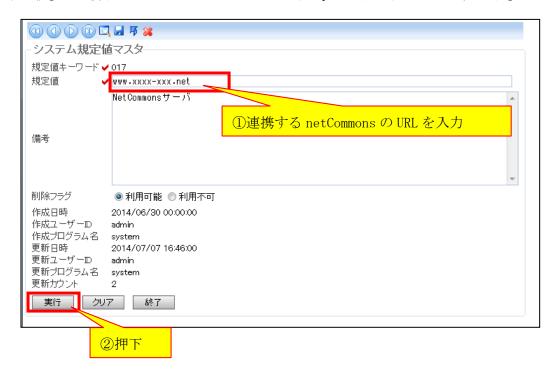

(4) 更新完了し「データが更新されました」のメッセージが表示されたら、「終了」ボタンを押下し、システム規定値マスタメンテを終了します。



以上で、NetCommons との連携の設定は完了です。

2-2. CSV 格納ディレクトリの設定

SmartEDC で作成される CSV の格納ディレクトリを独自に設定する場合、以下の手順で行います。

(1) WEB サーバに CSV 格納ディレクトリを作成します。

※Web アプリケーションより上記ディレクトリ内にディレクトリ/ファイル作成が行われますので書き込み権限・実行権限を与えるようにして下さい。


例:/home/smartedcディレクトリに sedc_csv ディレクトを作成し、アクセス権限を付与

```
[root@tedc_srv smartedc]# cd /home/smartedc
[root@tedc_srv smartedc]# mkdir sedc_csv
[root@tedc_srv smartedc]# chmod 777 sedc_csv
```


(2) SmartEDC 管理者機能を起動し、 「メインメニュー」- 「マスタメンテナンス」- 「システム規定値マスタ」を起動します。



(3) 「規定値キーワード」に"007"を入力し、TABキーを押下します。

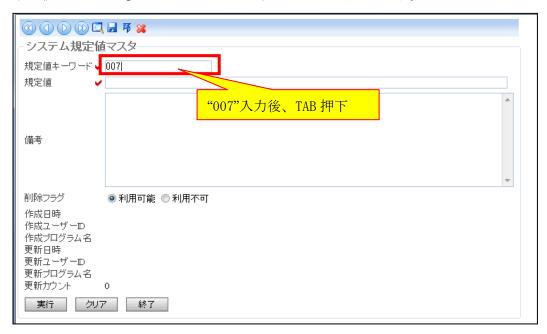

(4) データの出力先パスの設定データが表示されるので、 前述(1)で作成したディレクトリを入力し、「実行」ボタンを押下します。

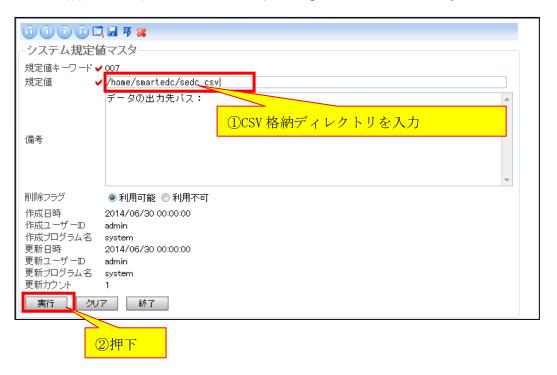

(5) 更新完了し「データが更新されました」のメッセージが表示されたら、「終了」ボタンを押下し、システム規定値マスタメンテを終了します。



以上で、CSV 格納ディレクトリの設定は完了です。

3. お問い合わせ

以下に当システムについてのお問合せ先を記載します。

● お問合せ先

https://github.com/epoc-software-open

お問合せが必要な場合は、上記 Github のプロジェクトメンバーにお問合せください。